


SpiroScout SP

Aggiornate il vostro ECG con misurazioni di spirometria a ultrasuoni

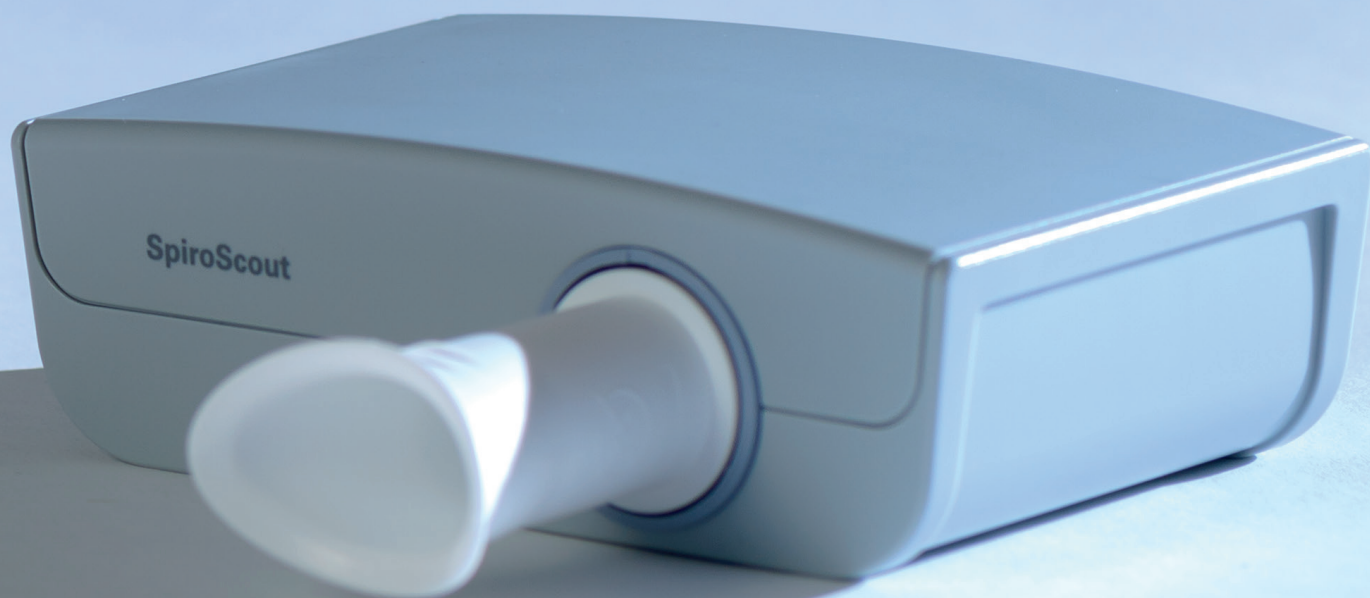

SPIROSCOUT SP

Aggiungere la spirometria al vostro dispositivo ECG è facile: spirometria con tecnologia a ultrasuoni che non richiede calibrazione, nessun tempo di riscaldamento e nessuna parte mobile.



SpiroScout SP contribuisce a rendere il vostro ufficio più efficiente aggiungendo le misurazioni di spirometria al vostro dispositivo ECG SCHILLER, usando la stessa piattaforma per due diverse applicazioni di test. Usufruirete di tutti i vantaggi di un ECG e di uno spirometro completo, con dati organizzati allo stesso modo perché sia più facile gestirli.

SpiroScout SP incorpora un sensore di flusso a ultrasuoni per misurare il flusso d'aria che entra ed esce dai polmoni del paziente. La tecnologia a ultrasuoni elimina i problemi associati ai metodi tradizionali della misurazione di flusso: non sono presenti parti mobili, né filtri da sostituire (ad es. filtri per la raccolta dell'espettorato), né materiali di consumo da calibrare.

La misurazione del flusso a ultrasuoni è indipendente dalla composizione, pressione e umidità del gas ed elimina gli errori collegati a queste variabili. ScoutTube monouso funge unicamente da barriera igienica e permette il passaggio degli impulsi a ultrasuoni tra i trasduttori. ScoutTube monouso non esegue alcuna funzione di misurazione e pertanto non richiede calibrazione.

I VANTAGGI ESCLUSIVI DELLA TECNOLOGIA A ULTRASUONI GANSHORN:

Tecnologia a ultrasuoni

- ❖ sensore non a contatto con il campione
- ❖ non influenzato da umidità, pressione barometrica e contaminazione
- ❖ nessuna calibrazione richiesta
- ❖ nessuna necessità di pulizia e manutenzione
- ❖ prodotti di consumo semplici ed economici
- ❖ precisione estremamente alta per flussi bassi
- ❖ nessun tempo di fermo


Tecnologie a confronto

(turbina, Fleisch, pneumotacografo, filo riscaldato)

- ❖ sensore sempre a contatto con il campione
- ❖ estremamente sensibile alla contaminazione (errori di misurazione)
- ❖ richiesta una regolare calibrazione
- ❖ richiesta la pulizia
- ❖ richiesti filtri
- ❖ rilevamento limitato di flusso basso
- ❖ tempi di fermo per manutenzione



CARDIOVIT AT-10plus

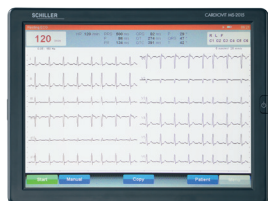


CARDIOVIT MS-2015



CARDIOVIT MS-2010



CARDIOVIT AT-102plus

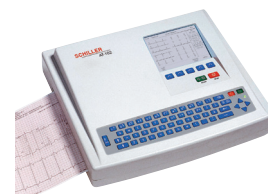

CARDIOVIT AT-102
(con SCM)*



SCOUTTUBE

- ❖ prodotto di consumo igienico per un solo paziente, per il pieno controllo della contaminazione
- ❖ di forma ovale per un'aderenza ottimale alle labbra e alla posizione dei denti
- ❖ conico per adattarsi a bocche di diverse grandezze



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

